

GoodKnight™ H₂O

HUMIDIFICADOR/CALENTADOR




- Humedad eficiente toda la noche
- Fácil de usar
- Fácil de lavar

Mejora la comodidad y el cumplimiento en los usuarios de CPAP

Para pacientes de CPAP que experimentan sequedad en las vías aéreas superiores, Tyco Healthcare ofrece vapor de ayuda con el *GoodKnight H2O* Humidificador/Calentador.

Diseñado para usarse con la gama *GoodKnight*, el Humidificador/Calentador incrementa la humedad del aire, reduciendo la sequedad en la nariz y la garganta del paciente. Mejorando el confort, ayuda a fomentar el cumplimiento del paciente en el tratamiento de la apnea del sueño.

Además, el humidificador posee unos pequeños huecos que encajan claramente con los dispositivos *GoodKnight* en la terapia del sueño, creando la combinación más pequeña y ligera CPAP/humidificador en el mercado.

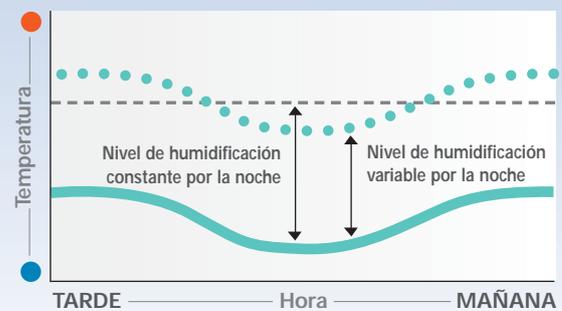

Curva característica de Control de la Humedad

La curva característica del control de la humedad asegura una diferencia de temperatura permanente entre la temperatura ambiente y la del agua para minimizar la condensación en el tubo y mantener el nivel de humidificación constante.

Temperatura de la habitación ———
GoodKnight H₂O
Humidificador a temperatura constante - - - -

tyco
Healthcare

Puritan Bennett

GoodKnight H₂O

CALENTADOR/HUMIDIFICADOR



GoodKnight™ H₂O
es compatible con:



Gama GoodKnight™ 420

&



GoodKnight™ 425
Equipos Bi-Nivel

Especificaciones

Prestaciones:

- Flujo máximo: 120 litros por minuto (fugas de flujo incluidas)
Resistencia: 0.2 cm H₂O
- Presión máxima de servicio: 25 cm H₂O
- Grado de humidificación: 12 mg H₂O/l a 60 l/min y en el nivel máximo de ajuste
- Tiempo de calentamiento :45 minutos

Características físicas:

- Dimensiones (Anc x Alto x Prof): 170 x 95 x 280 mm
- Peso (cuando está vacío): 0.8 Kg.
- Volumen operacional: 213 cm³ (volumen de gas mínimo en el depósito)
- Volumen útil del depósito de agua: 350 ml
- Máximo nivel de líquido: indicado en el depósito

Humidificación eficiente: La cámara de agua tiene una capacidad de 350 ml. que le permite funcionar durante toda la noche.

Fácil de limpiar: La cámara de agua tiene un sistema de fácil apertura que ofrece un mantenimiento sin problemas.

Fácil de usar: Posee un botón rotatorio que permite a los pacientes ajustar el nivel de calentamiento, dentro de unos límites.

Diseñado para ahorrar espacio: Añade sólo 7.5 cm de longitud a la base de cualquier equipo de terapia del sueño GoodKnight 420/425.

Información para pedidos

Descripción	Referencia
Humidificador/Calentador <i>GoodKnight H₂O</i>	M-114600-IN
Depósito de agua del <i>GoodKnight H₂O</i>	M-314600-00
Adaptador para la conexión cámara de agua/CPAP	M-414600-05
Sistema CPAP <i>GoodKnight 420G</i>	M-113900-IN
Sistema CPAP <i>GoodKnight 420S</i>	M-113903-IN
Sistema Auto-CPAP <i>GoodKnight 420E</i>	M-113902-IN
Equipo <i>Bi-Nivel GoodKnight 425</i>	M-114500-IN
Equipo <i>Bi-Nivel GoodKnight 425ST</i>	M-114502-IN

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Nellcor Puritan Bennett Inc. © 2004 Tyco Healthcare Group LP. Todos los derechos reservados.

C-AD-GKH20/ES

tyco
Healthcare

Tyco Healthcare Portugal
Produtos de Saúde Ida.
Est: Outeiro Polima, Lote 10-1º Piso
Abóboda
P-2785-521 S. Domingos de Rana
Tel: +351 21 448 10 00
Fax: +351 21 445 05 88

Tyco Healthcare Spain, S.L.
Fructuós Gelabert, 6, 8ª planta
08970 Sant Joan Despí
(Barcelona)
Tel: 93-4758610
Fax: 93-4758665

Puritan Bennett